


practico ultra low 9,5/80

Nieuwe denkwijzes voor barrièrevrije verpleging

Perfect afgestemd op de verpleging.

.bock[®]///

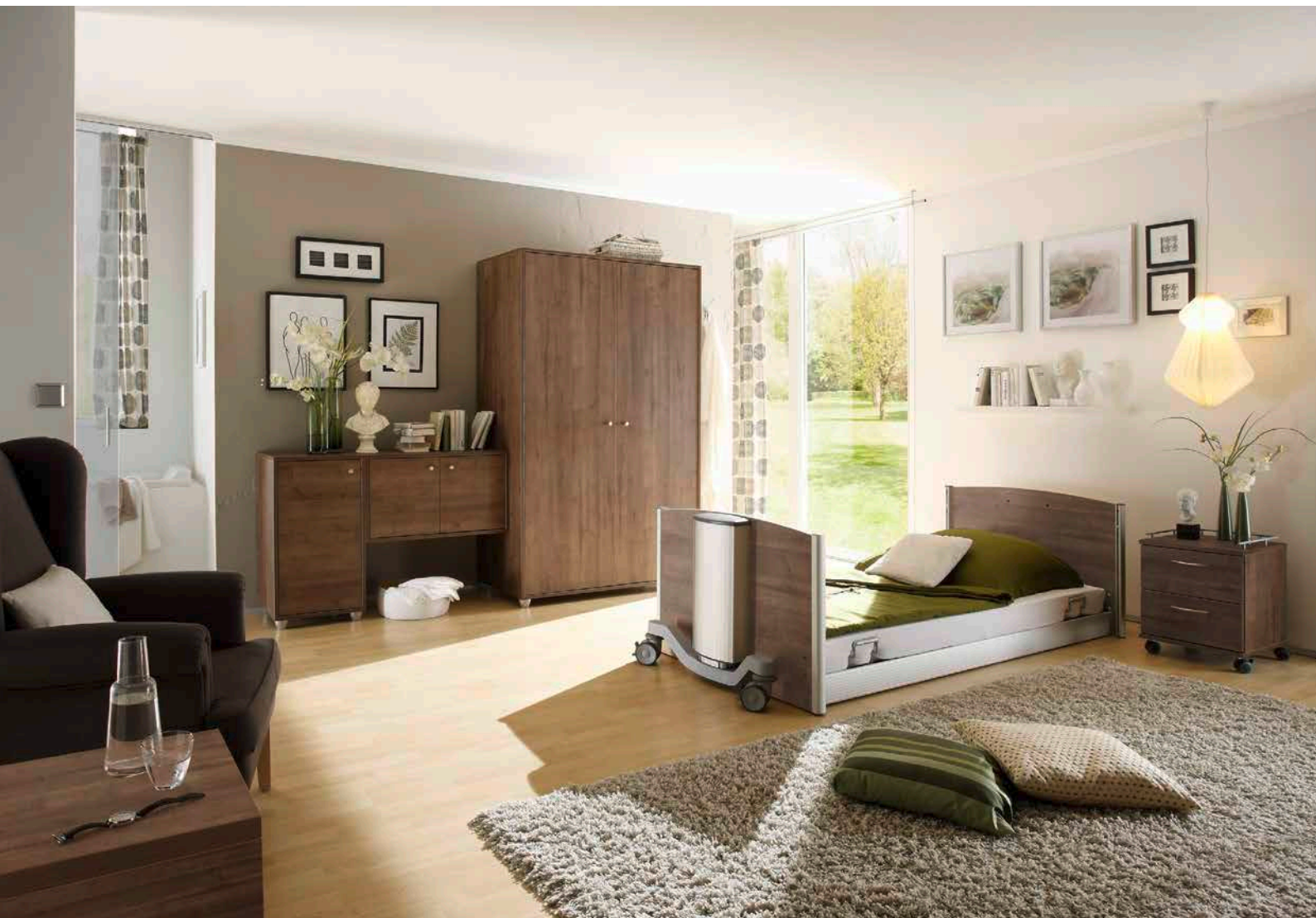

Nieuwe afmetingen in hoogteverstelbaarheid

– ideaal voor bewoners en verzorgers

De practico ultra low 9,5/80 kan zeer dicht bij de grond worden verlaagd: In de ultra-lage positie van slechts 9,5 cm wordt op een moderne manier gegarandeerd dat valincidenten worden voorkomen, waarmee de bewoner bewegingsvrijheid wordt geboden. Bovendien versterkt het binnen handbereik hebben van een vloerooppervlak het gevoel van veiligheid en zekerheid van de bewoners.



De practico ultra low 9,5/80 maakt ook het dagelijkse leven van het verplegend personeel gemakkelijker: In de ultra-lage positie kunnen de anders gebruikelijke extra veiligheidsmaatregelen, zoals het leggen van valmatten, achterwege blijven. Bovendien ondersteunt dit speciaal ontworpen bed de bewoners in hun eigen mobiliteit en maakt het voor hen gemakkelijker om zelfstandig in en uit te stappen.

// Betrouwbare manier voor het voorkomen van valincidenten

// Glijden in plaats van vallen

// Zelfbepaald, vrij liggen

// Rugsparend, gezond werken

De lighouding dichtbij de vloer van slechts 9,5 cm biedt onrustige patiënten veiligheid – geheel zonder beperkende maatregelen.

De stabiele hefzuiltechnologie maakt het mogelijk om naar een rugsparende werkhogte van 80 cm te gaan voor de dagelijkse verzorging.





Zelfbepaald liggen – met veiligheid en maximaal comfort

De practico ultra low 9,5/80 biedt een uitstekende functionaliteit en kan niet alleen als laag bed worden gebruikt, maar ook als flexibel comfortabel verpleegbed dat aan alle eisen voldoet.

Voor al onrustige bewoners profiteren van de veiligheid die de practico ultra low biedt: In de slaap- en rustpositie dicht bij de vloer op een hoogte van slechts 9,5 cm is het risico op letsel door het per ongeluk uitglijden uit bed vrijwel uitgesloten.

De barrièrevrije, ultra-lage positie met verzonken beddekken maakt het voor veel bewoners ook mogelijk om na het onbedoeld uitglijden zelfstandig naar het bed terug te gaan.

De mobiliteit van 80 tot 9,5 cm met voor ingestelde stops bij de in- en uitstaphoogte van 37,5 cm en extra veiligheidsstops op 27,5 en 15,5 cm biedt bewoners en verzorgers het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

De geïntegreerde bed- en bedhekverlenging tot 220 cm kan in een handomdraai worden uitgetrokken.



Ergonomisch en functioneel ligvlak voor een variabele instelling van verpleeg- en comfortabele posities

Typ 31



De pratico ultra low 9,5/80 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en eindstukvarianten en liften en stahulpmiddelen kunnen onder het bed worden gereden.

Typ 32



Typ 33



De technische voordelen in één oogopslag:

- // Hoogteverstelling: 9,5 tot 80 cm
- // Hoge dwars- en zijwaartse stabiliteit van het bed
- // Veilige werkbelasting: 220 kg
- // Externe afmetingen: 102 x 240 cm
- // Soepel lopende dubbele zwenkwielen (Ø100 mm) met geïntegreerde wandafstandhouders
- // Nieuw ergonomisch ligvlak
- // Veiligheid door uitschakeling bij ca. 37,5 + 27,5 + 15,5 cm
- // Geïntegreerde bedverlenging inbegrepen
Bedhekverlenging

Het barrièrevrije bed – voor onafhankelijke mobiliteit en zelfbeschikking

De barrièrevrije lage positie van het bed versterkt het gevoel van individuele veiligheid en zekerheid van bewoners en maakt onafhankelijke mobiliteit mogelijk – zowel bij het verlaten van het bed als het teruggaan naar bed: In de „stand met vier poten” is dit vaak ook mogelijk zonder hulp voor mensen met beperkte mobiliteit.

De bewoner kan de comfortabele bedhoogte van 37,5 cm met de handbediening voor het in- en uitstappen instellen.

In overeenstemming met de Werdenfelser Weg (de Werdenfelser Weg is een procedurele benadering in het kader van de toepasselijke Duitse zorgwet om het gebruik van fixaties en vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken) kan bij de practico ultra low 9,5/80 vrijheidsbeperkende maatregelen om valincidenten te voorkomen meestal volledig worden afgeschaft. Bovendien ondersteunen de verpleegbedden van Bock ook de eisen van de toekomstige „Expertisenormen Mobiliteit”. Diverse varianten van de beddekken bieden op verzoek extra sta-op hulpmiddelen, veiligheid, zekerheid en ondersteuning.

- // Comfortabele in- en uitstaphoogte
- // Bevordert de mobiliteit
- // Veilig terug naar bed
- // Zekerheid



Individueel instelbare comfortabele posities ondersteunen de waarnemingsbevordering en maken deelname aan dagelijkse gebeurtenissen mogelijk.

De telescopische beddekken en greepbeugel maken individuele mobiliteit en ondersteuning mogelijk.



.bock[®] ///



Wilt u meer informatie?

Meer informatie over de practico ultra low 9,5/80 is gemakkelijk te vinden op het internet. U hoeft alleen maar de weergegeven QR-code te scannen en u komt automatisch op onze website terecht.

Of wilt u direct advies? Dan kunt u ons gemakkelijk telefonisch of per e-mail bereiken. Ons toegewijde team adviseert u graag in een persoonlijk gesprek!

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Telefon: 05246 9205-0
Telefax: 05246 9205-25
e-Mail: info@bock.net
Internet: www.bock.net

© Geregistreerd handelsmerk
Bestelnr.: 890.02385
Stand: 09 | 2018
Technische wijzigingen voorbehouden.